



Цифровой дерматоскоп

D200

VISIONED D200

Создан для исключительного удобства
и гибкости в ежедневной работе

Профессиональное устройство получения изображений для ранней диагностики и фотодокументирования рака кожи. В этот удобный инструмент встроены самые передовые функции.

Важнейшие преимущества:

- ✓ уникальный сенсорный дисплей
- ✓ прекрасная эпифлюоресцентная дерматоскопия
- ✓ увеличение от x15 до x200
- ✓ автофокусировка для точной клинической съемки
- ✓ клинические снимки с разрешением 6,5 Мп
- ✓ подключение через порт USB.

Дерматоскопы Canfield работают с программой DermaGraphix, поэтому вы можете легко связывать дерматоскопические снимки с соответствующими новообразованиями на карте тела и 3D-модели.

Пометка невусов прямо на дисплее

Живое видеоизображение камеры выводится не только на большой монитор, но и на встроенный дисплей камеры. Несколько прикосновений к дисплею достаточно для того, чтобы пометить невусы, а затем сохранить и проанализировать снимок – не отвлекаясь на действия с клавиатурой и мышью.

DermaGraphix®


картография
новообразований
на теле

Видеодерматоскоп IntelliStudio с программой DermaGraphix для картографии новообразований производит быструю и точно воспроизводимую фотографию всего тела.



Преимущества IntelliStudio:

- ✓ Фотокамера с разрешением 50 Мп и студийные вспышки с обычным и с кросс-поляризованным светом.
- ✓ Полностью автоматическая съёмка высококачественных клинических снимков.
- ✓ Шаблоны контролируют настройки камеры и определяют позу пациента.
- ✓ Программно-контролируемый модуль фотографии обеспечивает точную позицию камеры и освещение для получения воспроизводимых снимков.

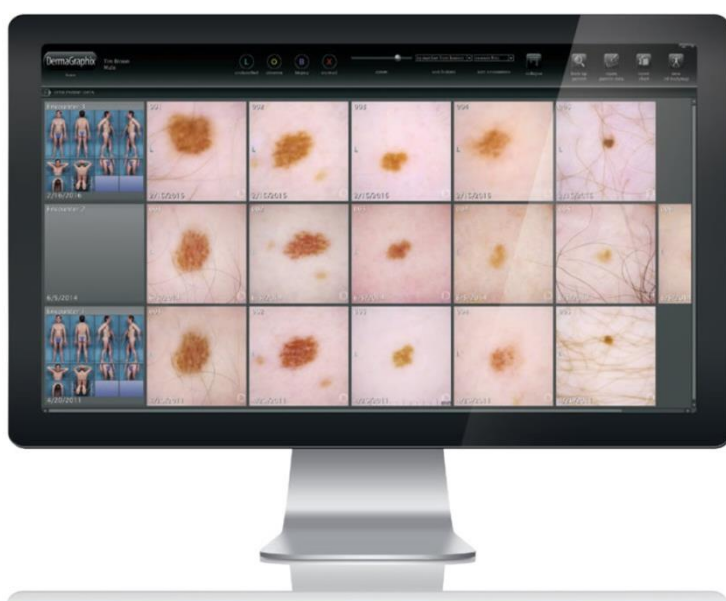

Панель управления DermaGraphix организует снимки пациента для их оптимального просмотра и оценки.

- ✓ Просмотр всех снимков одного образования в одной колонке и всех образований, снятых в одной сессии, в одном ряду.
- ✓ Безопасная система управления снимками, совместимая с HL7.
- ✓ Работа с протоколами DICOM и GDT.
- ✓ Совместимость с системой конфокальной микроскопии.



Первая неинвазивная программа для трихологии с использованием искусственного интеллекта

Эта полностью автоматизированная программа не требует обрезки волос и позволяет использовать оптимальные планы лечения с объективным мониторингом результатов, которые легко продемонстрировать вашему пациенту.



Преимущества HairMetrix

- ✓ Полностью автоматический анализ волос без их обрезки.
- ✓ Подсчёт соотношения фолликулярных юнитов пушка и зрелых волос.
- ✓ Быстрая неинвазивная трихологическая консультация на высоком уровне.
- ✓ Объективный мониторинг результатов.
- ✓ Использование новейших алгоритмов ИИ.
- ✓ Лёгкое получение снимков.
- ✓ Не нужна подготовка головы и волос.
- ✓ Закрепляет пациента за вашей практикой.
- ✓ Не нужна внешняя лаборатория.



Печатные и электронные отчёты создаются мгновенно



Новейшая программа HairMetrix работает быстро и обладает интуитивным интерфейсом, позволяющим проводить эффективные консультации пациентов.



Информативные и хорошо оформленные печатные отчёты снабжены логотипом и данными вашей практики.

Сервисный договор Canfield Care®

предусматривает неограниченную техническую поддержку, гарантию на оборудование, тренинги, обновление ПО и доступ на портал ViewMyConsult®. Один год Canfield Care включён в вашу покупку.

Дополнительное лицензирование.

Вы можете просматривать сессии пациентов с нескольких рабочих мест. Это хорошее решение для практики, в которой работает несколько кабинетов.

Добавление программы DermaGraphix

даёт прямой доступ в эту программу, чтобы отслеживать подозрительные образования.

CANFIELD Scientific

ООО "МАКСмедикал"
уполномоченный представитель
Canfield Scientific в Российской
Федерации.

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 25, стр. 1
г. Москва, 125047 Российская Федерация.
Тел. +7 499 502 79 44.
E-mail: info@maxmedical.ru
Сайт: <https://maxmedical.ru>

IntelliStudio, DermaGraphix, ViewMyConsult,
Canfield Care и HairMetrix являются
торговыми марками компании Canfield
Scientific, Inc.

©10.02.2021 All rights reserved. Все права
защищены.